


1 إجراء الاختبار

- إذا كنت تقومين بعمل الاختبار من يوم بدء دورتك الشهرية، يمكنك عمل الاختبار في أي وقت من النهار.
- في حالة إجراء الاختبار مبكراً، استخدميني بول الصباح.
- عندما تكونين مستعدة لعمل الاختبار، قومي بإزالة شريحة الاختبار مع مغلف الرقاقة المعدنية وانزعي الغطاء الأزرق.
 - استخدميني شريحة الاختبار مباشرة.

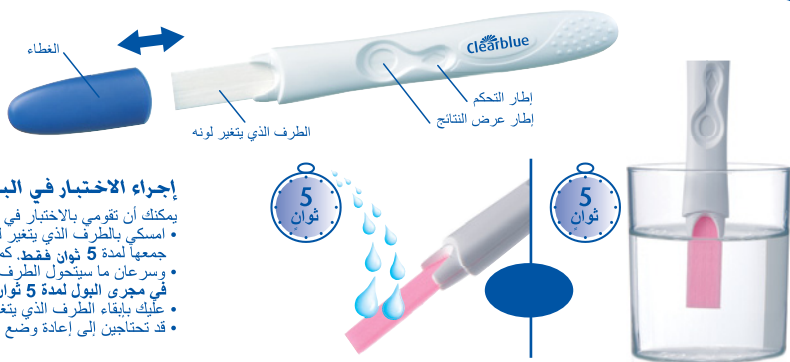

إجراء الاختبار في البول

- يمكنك أن تقومي بالاختبار في مجرى البول مباشرة، أو في عينة من البول تم جمعها في حاوية نظيفة وجافة.
- امسكي بالطرف الذي يتغير لونه بحيث يكون متجهاً للأسفل سواء كان في مجرى البول أو في عينة البول التي تم جمعها لمدة 5 ثوان فقط. كما هو موضح بالشكل.
 - وسرعان ما سيحول الطرف إلى اللون الوردي ليدل على امتصاص البول. يجب عليك الاستمرار في الإمساك بالطرف الذي يتغير لونه في مجرى البول لمدة 5 ثوان كاملة.
 - عليك بإبقاء الطرف الذي يتغير لونه متجهاً نحو الأسفل أو وضعي شريحة الاختبار بشكل مسطح إلى أن يظهر الخط في إطار التحكم.
 - قد تحتاجين إلى إعادة وضع الغطاء.

يرجى الرجوع إلى السؤال رقم 5 الموجود أدناه في حالة عدم اكتساب الطرف الذي يتغير لونه اللون الوردي بشكل كامل.

2 انتظري دقيقتين

- يظهر خط أزرق في إطار التحكم ليدل على إتمام عمل الاختبار.
- يمكنك قراءة النتيجة عقب دقيقتين.
- لا تقرني النتيجة إلا بعد ظهور الخط الأزرق.
- إذا لم يظهر خط أزرق بإطار التحكم خلال 10 دقائق، فيدل ذلك على عدم إتمام الاختبار (يرجى الرجوع إلى السؤال رقم 6 الموجود أدناه).

هام! اقرني النتيجة خلال 10 دقائق من عمل الاختبار. وتجاهلي أية تغييرات تتم بعد هذا الوقت.

3 قراءة نتيجة اختبارك

يمكنك الآن قراءة النتيجة في إطار عرض النتائج.

ليس هناك مشكلة إذا كان أحد الخطوط التي تشكل العلامة "+" أفتح أو أغمق من الأخرى؛ فالنتيجة واحدة وهي **Pregnant** "حامل".



إذا كنت لا تزالين غير واثقة من النتيجة يرجى الرجوع إلى السؤال رقم 7 الموجود أدناه لاطلاع على التفاصيل الكاملة.



أسئلة وأجوبة – الرجاء قراءة القسم الموجود أدناه والذي يجيب على الأسئلة الأكثر تكراراً.

- أسئلة وأجوبة
1. كم يبلغ مستوي دقة اختبار Clearblue؟
تصل دقة Clearblue أكثر من 99% في الاختبارات المعملية عند استخدامه في أول يوم مقرر لبدء دورتك الشهرية.
 2. كيف يعمل اختبار الحمل Clearblue؟
عندما تكونين حاملاً ينتج جنسك هرمون الحمل hCG (هرمون مشيمي يثري مخفر التوائم). تزيد كمية hCG في جنسك في المراحل المبكرة من الحمل. يستطيع Clearblue تتبع الكميات الصغيرة من هذا الهرمون في البول. تبلغ حساسية هذا الاختبار 25 مليون وحدة دولية/مل).
 3. متى أستطيع إجراء اختبار باستخدام Clearblue؟
يمكن استخدام Clearblue حتى 4 أيام قبل الموعد المقرر لبدء دورتك الشهرية إذا أجريت الاختبار قبل موعد بدء الدورة وحصلت على النتيجة 'Not Pregnant' (غير حامل)، فإزال ذلك احتمال أن تكوني حاملاً. انظري المخطط التالي الذي يوضح نتائج من الاختبار المعمل لـ Clearblue باستخدام عيّنات حمل ميكرة.

إجراء الاختبار مبكراً	توصي Clearblue بإجراء الاختبار في اليوم المقرر لبدء الدورة الشهرية. بالرغم من أن هرمون الحمل يزيد بسرعة في بداية الحمل ويمكن استخدام Clearblue في الاختبار حتى أربعة أيام قبل الموعد المقرر لبدء الدورة الشهرية. في الاختبار المعمل باستخدام عيّنات حمل ميكرة، أعطى Clearblue النتائج التالية:
عدد الأيام قبل بدء الدورة الشهرية <td>% العيّنات المأخوذة من أمراء حامل وتعطي النتيجة 'Pregnant' (حامل)</td>	% العيّنات المأخوذة من أمراء حامل وتعطي النتيجة 'Pregnant' (حامل)
-1	87%
-2	84%
-3	74%
-4	53%

- لاستخدام موعد بدء دورتك الشهرية، قومي بحساب طول دورتك العادية عن طريق حساب عدد الأيام منذ اليوم الأول لدورتك حتى اليوم السابق لبدء دورتك التالية.
- إذا كنت ترمين بدورات غير منتظمة، فلابد أن تعطي وقتاً بمقدار أطول دورة لك في الأشهر الأخيرة قبل إجراء الاختبار.
 - إذا لم تكن لديك فكرة عن موعد بدء دورتك الشهرية فإتنا ننصح بإجراء الاختبار بعد مدة لا تقل عن 19 يوماً من آخر مرة مارس فيها الجنس بدون حماية.
 - إذا كنت تقومين بعمل الاختبار من يوم بدء دورتك الشهرية، يمكنك عمل الاختبار في أي وقت من النهار. في حالة إجراء الاختبار مبكراً، استخدميني بول الصباح. بخضري تناول الكثير من السوائل قبل إجراء الاختبار.
 - إذا كانت النتيجة 'Not Pregnant' (غير حامل) ومزال هناك شك في وجود حمل فراجعي السؤال رقم 10.

4. هل يمكن أن تؤثر أي أدوية أو ظروف صحية على النتيجة؟
قومي دائماً بتعليمات جهة التصنيع الخاصة بأي أدوية تتناولينها قبل إجراء الاختبار.
- يمكن أن تؤدي عقابير الحساسية التي تحتوي على hCG إلى نتائج مشددة (عادة ما يتم تناول عقابير الحساسية هذه بلعش وقد يؤدي إجراء الاختبار بعد وقت قصير جداً من الحقن إلى نتيجة 'Pregnant' (حامل) زائفة).
- علاجات الحساسية الأخرى (مثل سيمسولومين) والمسكنات وعقاقير منع الحمل الهرمونية (مثل أقراص منع الحمل) لا تؤثر على النتيجة.
- إذا كنت قد توقفت مؤخراً عن استخدام عقابير هرموني لمنع الحمل أو إذا كنت تستخدمين علاجات للحساسية مثل domiphen citrate، فقد تكون اللورات الشهيرة لديك غير منتظمة مما يؤدي إلى إجراء الاختبار في وقت مبكر جداً.
- إذا كنت حاملاً مؤخراً (حتى لو لم يسمر الحمل لمدة كاملة) فقد تحصلين على نتيجة 'Pregnant' (حامل) زائفة.
- الحمل خارج الرحم والتكيس في المبيض وانفصال الطمث وبعض الحالات الصحية النادرة جداً يمكن أن تعطي نتائج مشددة.
- إذا حصلت على نتيجة 'Pregnant' (حامل) فمن الممكن أن تجدي فيما بعد أنك لست حاملاً بسبب فقدان طبيعي للحمل يمكن أن يحدث في المراحل المبكرة.
- إذا حصلت على نتائج غير متوقعة فلابد أن تتألميها مع طبيبك.

5. إذا قمت بإجراء الاختبار ولكن لم يتكسب الطرف الذي يتغير لونه اللون الوردي بشكل كامل، ما الذي يعين أن أفعله؟
إذا لم يتغير لون الطرف الذي يتغير لونه إلى اللون الوردي بشكل كامل، فيحصل لك لم تضعي كمية كافية من البول. ومع ذلك، فإذا ظهر خط أزرق في إطار التحكم خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار، فإن ذلك يدل على إتمام الاختبار. إذا لم يظهر خط أزرق بإطار التحكم في خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار، يرجى الرجوع إلى السؤال رقم 6.
6. استخدمت الاختبار ولكن لم يظهر أبق في إطار التحكم، ما الذي يعين أن أفعله؟
إذا لم يظهر خط أزرق في إطار التحكم في خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار، فيدل ذلك على عدم إتمام الاختبار. وقد يرجع ذلك إلى:

- عدم إبقاء الطرف الذي يتغير لونه متجهاً للأسفل أو عدم وضع شريحة الاختبار بشكل مسطح بعد وضع البول.
- استخدام كمية كبيرة جداً أو قليلة جداً من البول. يجب أخذ العينة لمدة 5 ثوان فقط.
- لادن أن تقومي بإجراء الاختبار مرة أخرى باستخدام اختبار جديد مع الحرص على اتباع التعليمات المبينة أدناه على قد تحتاجين إلى أخذ عينة بول أخرى في حاوية نظيفة وجافة مع عس الطرف الذي يتغير لونه لمدة 5 ثوان فقط.

7. ماذا أفعل في حالة عدم التكد من النتيجة؟
• لكي تكون النتيجة 'Pregnant' (حامل)، يجب أن يظهر خط أزرق في إطار التحكم وأيضاً الرمز '+' في إطار النتيجة وذلك في خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار.
- قد يتبوع شكل الخط في إطار النتيجة، ولكن لادن من تماثل عرض الخطوط التي تشكل الرمز '+' والخط الموجود بإطار التحكم (مثل الصور من A-C الموجودة أعلاه).
- الصورة A: عادة ما يحدث ذلك عندما تكونين حاملاً وتقومين بإجراء الاختبار بعد عدة أيام من الموعد المقرر لبدء الدورة الشهرية حيث يرتفع مستوي هرمون HCG.
- الصورة B: ومن المعتاد ظهور ذلك عندما تكونين حاملاً وتقومين بإجراء الاختبار في اليوم المقرر لبدء الدورة الشهرية حيث لا يزال مستوي هرمون HCG منخفضاً.
- الصورة C: يدل ظهور ذلك على نتيجة 'Pregnant' (حامل).

8. ما ممة الاحتفاظ بالنتيجة؟
يمكن قراءة النتيجة في أي وقت خلال 10 دقائق. بعد مرور 10 دقائق، ينبغي عدم الالتفات إلى ظهور أي تغيير في النتائج.
9. يقول الاختبار إنني 'Pregnant' حامل، ما الذي يعين أن أفعله؟
إذا كانت نتيجة الاختبار 'Pregnant' (حامل) فلابد أن تنتهي إلى الطبيب، والذي يمكنه أن يقدم النصح بشأن الخطوات التي يعين اتخاذها فيما بعد.
10. يقول الاختبار إنني لست حاملاً، ما الذي يعين أن أفعله؟
قد لا تكوني حاملاً أو قد لا يكون مستوى هرمون الحمل مرتفعاً بعد بما يكفي لتتبعه أو قد تكوني أخذت في حساب يوم بدء الدورة الشهرية.
- إذا كنت قد أجريت الاختبار مبكراً، قومي بإجرائه مرة أخرى في موعد بدء دورتك الشهرية.
- إذا كان موعد بدء دورتك الشهرية متأخراً، قومي بإجراء الاختبار مرة أخرى في خلال ثلاثة أيام. إذا كان هذا الاختبار يعطيك النتيجة 'Not Pregnant' (غير حامل) ومزال ذلك دورتك الشهرية لم تبدأ فاستشيري الطبيب.

للتعرف على الخطوات التالية وعلى معلومات ونصائح عامة تتعلق بشكالت الحمل، تفضلي زيارة موقعنا الإلكتروني على:

www.clearblue.com